

VEGAS
COSMETICS
BODY FORMER



Intensive Body Renewal Complex

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wichtige Informationen zum Body Former	2
Technische Daten	3
Gerätfunktionen	4
Hinweise zur Anwendung & Pflege	4
Funktionen und Programme	5
Effektive Anwendung	7
Art der Anwendung	7

ANLEITUNG FÜR BENUTZER

Wir bedanken uns, dass Sie sich für den Kauf unseres Body Formers entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, damit Sie über das Gerät ausreichend informiert sind, bevor Sie es zum Einsatz bringen.

Die Gebrauchsanweisung sollten Sie an einem sicheren Ort aufbewahren, falls Sie diese später benötigen.

Dieses Gerät wurde entwickelt, um kosmetische Anwendungen auch Zuhause und auf Reisen durchführen zu können. Es handelt sich hierbei nicht um ein medizinisches Gerät, daher ist es nicht für therapeutische Maßnahmen geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei nicht sachgemäßer Nutzung. Diese Anleitung sollte befolgt werden.



CELLULITE CONTROL

Anti-Cellulite Lotion mit Wirkstoffen, die glättende und zugleich straffende Wirkung auf die Haut haben. Die Reduzierung von Dellen soll gefördert und die Fetteinlagerung vermindert werden. Anwendung: Täglich auf die betroffenen Körperstellen auftragen und einmassieren, bis das Produkt vollständig von der Haut aufgenommen wurde. Ein leichtes, kribbelndes Wärmegefühl stellt sich ein und ggf. rötet sich die Haut minimal, was aber bei Anwendung des Produktes normal ist. Hände nach der Anwendung gut waschen und nicht mit Augen und Schleimhäuten in Kontakt bringen.



FORMING GEL

Gel mit thermogenen Wirkstoffen, fördert die Ausscheidung von Toxinen und hat lipokatalytische Wirkung. Es wirkt zudem entwässernd und nachhaltig auf adipöses Gewebe. Optimal zur Anwendung mit unserem Body Former. Der hohe Aloe Vera Gehalt sorgt für einen optimalen Pflegeanteil. Anwendung: Produkt reichlich auf die Haut auftragen und mit leichten, sanften Bewegungen einmassieren oder mit dem Body Former "einschleusen". Überschüssiges Gel nach der Anwendung abwischen.



An Tagen, an denen Sie kein Forming Gel verwenden, können Sie Cellulite Control benutzen.


WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM BODY FORMER

Lesen Sie die Informationen sorgfältig durch, bevor Sie den Body Former anwenden. Folgende Sicherheitshinweise müssen bei der Nutzung dieses Gerätes beachtet werden:

1. Bei empfindlicher Haut sollte die erste Anwendung nur von kurzer Dauer sein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät an einem sicheren Ort befindet und führen Sie erst dann die Anwendung durch. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, bitte nicht anfassen, bis der Stecker von der Steckdose entfernt wurde.
3. Verwenden Sie nur das Originalladegerät, um das Gerät aufzuladen.
4. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es kaputt ist oder heruntergefallen ist. Es wird unter diesen Bedingungen nicht richtig funktionieren.
5. Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn Sie schwanger sind, bei Intrauterinpressar, wenn Sie an Epilepsie leiden, bei Herzerkrankungen, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben und bei metallischen Prothesen. Bei eingesetztem Intrauterinpressar (wie z.B. Hormonspirale, Kupferspirale, etc.) sollte der Body Former nicht im Bauchbereich angewendet werden.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht an Lippen, Augen, Hals oder an Körperstellen, die einem chirurgischen Eingriff unterzogen wurden.
7. Der Body Former ist zur Anwendung auf gesunder Haut vorgesehen.
8. Wenn Sie sich während des Eingriffs schlecht fühlen, sollte die Anwendung sofort beendet werden. Im Zweifelsfall suchen Sie einen Arzt auf.



Wichtige Sicherheitshinweise

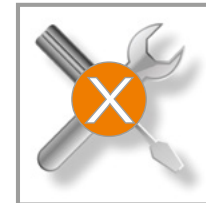


Öffnen oder demontieren des Gerätes nicht gestattet.




Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.




Vor Hitzequellen fern halten.

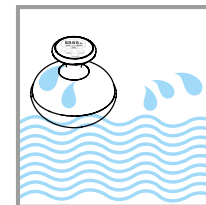

Trocken aufbewahren, nicht mit fließendem oder großen Mengen Wasser in Verbindung bringen.

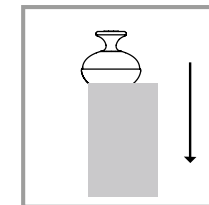


An einem sicheren Ort aufbewahren

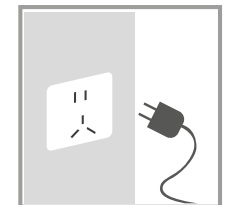

Verwenden Sie kein anderes Ladegerät


TECHNISCHE DATEN

Das Gerät

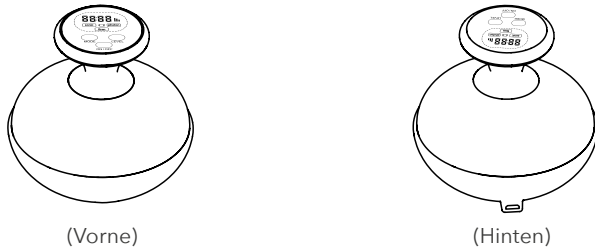


(Vorne)

(Hinten)

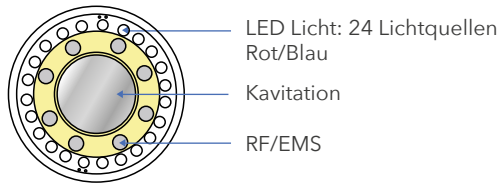

BILDSCHIRM UND FUNKTIONEN

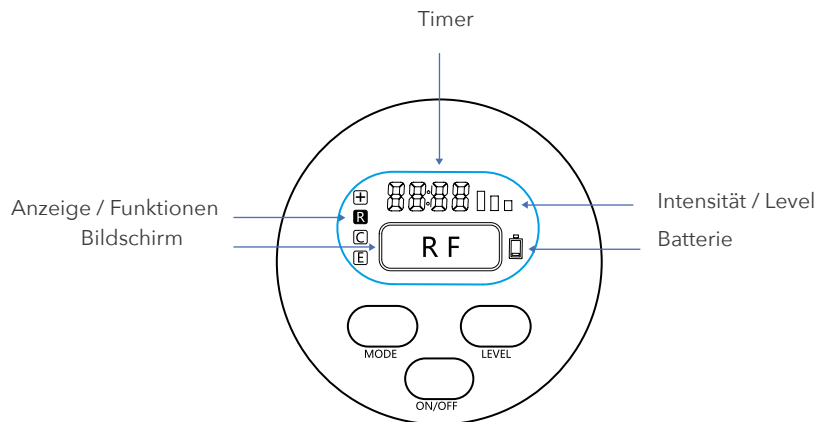

HINWEISE ZUR ANWENDUNG MIT DEM BODY FORMER

VOR DER ANWENDUNG

JETZT KÖNNEN SIE DIE GERÄTEFUNKTION UND KAVITATION TESTEN.

Das Gerät auf eine flache Oberfläche stellen und mit einigen Tropfen Wasser den Applikator besprengen.

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON / OFF-Taste ein und drücken Sie die Taste CAVI, um den Ultraschall zu aktivieren. Wählen Sie nun die gewünschte Intensität (low-niedrig; high-hoch).

Wenn die Wassertropfen anfangen zu vibrieren wissen Sie, dass die Ultraschallwellen erzeugt werden und das Gerät einsatzbereit ist.

VERTRÄGLICHKEIT DER HAUT MIT DEM ANWENDUNGSPRODUKT PRÜFEN:

Testen Sie das Anwendungsprodukt auf Ihrem gereinigten Handgelenk.

Tragen Sie das Forming Gel auf und beobachten Sie die Hautreaktion. Wenn Sie während dieser Testphase einen unangenehmen Effekt wahrnehmen, beenden Sie sofort den Test und die Anwendung.

Sollten Sie keine unangenehme Reaktion verspüren, können Sie das Behandlungsprodukt mit dem Gerät verwenden.

Falls während der Anwendung Beschwerden oder "allergische Reaktionen" auftreten sollten, beenden Sie sofort die Behandlung.

ANWENDUNG

Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Programm auswählen:

- Bei jedem Drücken der Taste MODE ändert sich die Anwendungsfunktion. Die Reihenfolge ist wie folgt:

COMBI (RF + CAVI + EMS) -> RF -> CAVITATION -> EMS -> Function off

- Um die Phototherapie zu aktivieren, drücken Sie erneut ON/OFF. Die Sequenz ändert sich wie folgt:

Photon Rot -> Photon Blau -> Photon aus

Intensitätsstufe / Level:

Die Intensitätsstufe ist für RF, CAVI und EMS verfügbar. Der Standardwert ist Level 1. Bei jedem weiteren Mal der Verwendung der LEVEL-Taste, wird die Intensität erhöht.

Die Reihenfolge ist wie folgt:


Level 2 -> Level 3 -> Zurück zu Level 1

LADEFUNKTION


Laden Sie das Gerät mindestens 3 Stunden vor der ersten Anwendung auf, um die Batterie zu aktivieren.

Leer: Wenn die Batterie leer ist, piept das Gerät zehnmals und schaltet sich automatisch ab.

Beim Laden: Wenn das Gerät an der Ladestation angeschlossen ist, erleuchtet das Display. Die Hintergrundbeleuchtung wird nach 30 Sekunden gedimmt. Ladevorgang abgeschlossen: Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Lade-Display ausgeblendet und das Symbol "Akku voll" erscheint.

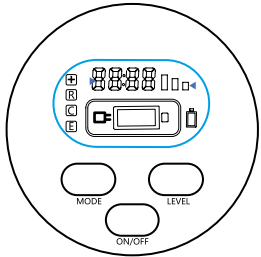

Anzeige während des Ladevorgangs

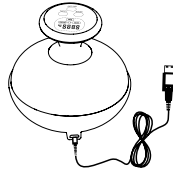

Ladezeit	Betriebszeit
ca. 3 Stunden	ca. 1,5 Stunden

FUNKTIONEN UND PROGRAMME

Dieses Gerät wird verwendet zur:

- Fettverbrennung
- Glättung und Straffung der Haut
- Falten- und Cellulitereduzierung
- Behandlung von Unreinheiten und Entzündungen der Haut

RADIOFREQUENZ (RF)

Radiofrequenz ist eine ästhetische Anwendung zur Bekämpfung von Schlanheit des Gesichts oder Körpers. Sie ist sehr effektiv bei der Beseitigung von Falten, Fett und Cellulite. Eine sichere Methode mit langanhaltender Wirkung.

Das Radiofrequenzgerät erhöht die Temperatur der Haut und der Muskeln auf ungefähr 41 °C und zieht somit das bestehende Kollagen zusammen und erhöht die Produktion von Fasern Kollagen und Elastin, die der Haut mehr Halt und Festigkeit verleihen.

Die Temperaturerhöhung durchbricht die Membranen der Fettzellen und verursacht, dass diese aus dem Körper eliminiert werden. Die Ergebnisse sind bereits in den ersten Tagen sichtbar.

KAVITATION (CAVI)

Kavitation ist eine nicht-invasive Methode, mit der Sie Ihren Körper effektiv behandeln können.

Sie erhalten bereits nach der ersten Sitzung sichtbare Ergebnisse.

Wenn Sie erfolglos versucht haben verlagertes Fett mit Diät, Bewegung oder Behandlungen weg zu bekommen, ist Kavitation die Lösung verlagertes Fett effektiv zu reduzieren.

Die Kavitation wirkt auf die Ablagerungen des verlagerten Fettes, welches durch das lymphatische System eliminiert wird. Somit benötigen Sie keine Schönheitsoperationen. Wenn die Ultraschallwellen mit niedriger Frequenz das Gewebe erreichen, insbesondere die Fettleibigkeit, verursachen diese einen Verlust der verlagerten Fette. Die Ultraschallwellen "zerteilen" die Zellmembranen und befreien sie von Fetten, welche durch das Lymphsystem eliminiert werden.

EMS (ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION)

Ein Verfahren, welches elektrische Ströme zur Anwendung von schlaffem Gewebe, Muskelstraffung und Lymphdrainage beinhaltet. Die elektrische Muskelstimulation sorgt für Muskelkontraktion, verbessert die Blutzirkulation, unterstützt die cellulare Sauerstoffversorgung und fördert den Abtransport von Giftstoffen.

PHOTOTHERAPIE

Rotes Licht: Stimuliert die Produktion sowohl von natürlichem Kollagen, als auch Elastin und verbessert die Durchblutung. Die Haut gewinnt bedeutend an Elastizität und Geschmeidigkeit.

Blaues Licht: Entzündungshemmende Wirkung. Hilft Cellulite und unreine Haut zu beheben.
↳ Verwenden Sie das Gerät bei Behandlung von Unreinheiten nur in den betroffenen Bereichen in Kombination mit unseren Sensitive Concept Produkten.



Zu jeder Anwendung können Sie die Phototherapie mit rotem oder blauem Licht verwenden.

COMBI

Drücken Sie MODE, um die COMBI-Funktion zu starten. Wählen Sie die gewünschte Stufe. RF, Kavitation und EMS benötigen jeweils 10 Sekunden und arbeiten im Wechsel.

Durch Kreisbewegungen während der Anwendung erzielen Sie das beste Ergebnis. Halten Sie mit dem Anwendungsprodukt die Haut stets befeuchtet; der Gerätekopf sollte immer gleiten.

ANWEISUNG ZUR WIRKSAMEN ANWENDUNG:

- Reinigen Sie die Haut
- Tragen Sie reichlich Forming Gel im Anwendungsbereich und auf dem Applikatorkopf auf.
- Wählen Sie das Programm und die gewünschte Intensität aus und starten Sie die Anwendung mit massageähnlichen Bewegungen und leichtem Druck, wie auf den Bildern beschrieben
- Steigern Sie die Intensität, je nach Empfinden, während der Anwendung.
- Nach dem Anwendungsprozess überschüssiges Forming Gel entfernen.
- Tragen Sie nun die Cellulite Control Lotion mit Ihren Händen auf und lassen Sie diese einwirken. (Auch hier Verträglichkeitstest durchführen)



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

3x pro Woche á 20min.



Zu Ihrer Sicherheit ist der Body Former für 10 Minuten pro Zyklus programmiert.

KÖRPERZONENANWENDUNGEN:

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

ARME

Beginnen Sie mit kreisenden Bewegungen vom Ellenbogen zur Achsel hin.

BRUST

Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf der Brust auf. (siehe Foto 1).

Bewegen Sie den Body Former, wie in der Abbildung dargestellt.

2. Wenden Sie das Gerät nicht direkt auf den Brustwarzen an!

BAUCH- UND TAILLENBEREICH:

Massieren Sie die Taille von oben nach unten und von außen nach innen.

Kreisende Bewegungen ebenfalls um den Bauchnabel herum. Machen Sie schwungvolle Kreisbewegungen unterhalb des Bauchnabels.

BEINE

Beginnen Sie am Knie mit kleinen Kreisbewegungen nach oben.

HÜFTE

Massieren Sie von der Hüfte an aufwärts, um auch hier ein straffendes Ergebnis zu erzielen.

FÜSSE

In kreisenden Bewegungen an der Fußsohle entlang massieren um die Durchblutung anzuregen.



Foto 1



Foto 2



TECHNISCHE DATEN:

VEGAS COSMETICS GmbH
LISE-MEITNER-STR. 4-6
64823 GROSS-UMSTADT | GERMANY

TEL.: +49 (06078) 96 81 10
FAX: +49 (06078) 96 81 11

www.vegascosmetics.de
info@vegascosmetics.de

Name des Produktes: Body Former
Modell-Name: 470
Stecker Energiezufuhr ein: 110-240V
Stecker Energiezufuhr aus: 5V 1A
Akku 900 mAh Lithium Battery
Dimensionen (mm): 990 * 990 * 94
Phototherapie: rot/blau
Anwendungsdauer: Schaltet sich nach 10
Minuten automatisch aus.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

Garantiekarte

Produkt Modell:

Kaufdatum:

Kaufort:

Vegas Cosmetics Berater :

1. Sollte entgegen aller Erwartung bei Ihrem erworbenen Gerät innerhalb der ersten 2 Jahre nach dem Erwerb Mängel auftreten, können Sie von Ihrer 24 monatigen Garantie Gebrauch machen.
2. Bei Garantiefällen das Gerät mit Ihrem Kaufbeleg und der Originalgarantiekarte einschicken und wir werden Ihr Gerät kostenlos reparieren oder austauschen.
3. Wurde das Gerät nicht sachgemäß genutzt und entgegen der Sicherheitshinweise behandelt, verfällt die Garantie!
4. Jede unsachgemäße Nutzung des Body Formers, wie:
 - a. Öffnung des Gehäuses sowie Überladung des Akkus (max. 3 Std.)
 - b. Schäden durch falsche Lagerung.
 - c. Beschädigungen durch Fallenlassen oder willkürliche Beschädigung der Bauteile.
 - d. Beschädigungen durch Wasser- oder Hitzeeinfluss, sind von der Garantie ausgeschlossen.
5. Diese Garantiekarte wird nicht ersetzt, bitte sorgfältig aufbewahren.